

ARDESTO

ПОРТАТИВНИЙ ІРИГАТОР
Інструкція з експлуатації

PORTABLE IRRIGATOR
Instruction manual



POI-MD300W

ЗДОРОВЕ ЖИТТЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ЗУБІВ ТА ЯСЕН! ДОПОМОГА У ЧИЩЕННІ ОРТОДОНТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ


З іригатором Ardesto можна ефективно та легко дбати про здоров'я ясен, зубів і красиву усмішку, використовуючи його щодня! Завдяки тиску води та пульсації іригатор видаляє шкідливі бактерії та залишки їжі у проміжках між зубами та яснами, брекетами чи іншими ортодонтичними конструкціями, куди неможливо дістатися звичайною зубною щіткою та, навіть, зубною ниткою.

Звичайне чищення

Звичайна зубна щітка не може досягнути віддалених проміжків і видалити всі бактерії.





Зубна нитка чистить вздовж обмеженої ділянки між зубами і яснами та може пошкодити ясна.

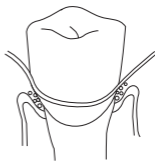

Чищення за допомогою іригатора


Іригатор видаляє залишки їжі та шкідливі бактерії за допомогою імпульсного струменя води. За щоденного використання швидко надає диханню чистоти, яснам та зубам здоров'я, полегшує чи взагалі робить нарешті можливим чищення ортодонтичних конструкцій! Порадьтеся з дантистом щодо режимів використання іригатора.

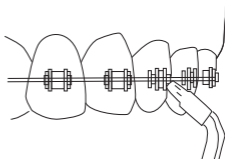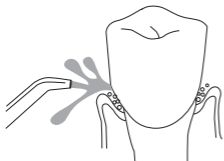

ЗМІСТ

Опис приладу.....	4
Етапи роботи.....	5
Поради щодо використання.....	5
Як збирати і розбирати прилад.....	6
Комплектація.....	9
Акcesуари.....	9
Заходи безпеки.....	10
Обслуговування та утилізація батареї.....	12
Усунення несправностей.....	12
Умови гарантії.....	24

ОПИС ПРИЛАДУ

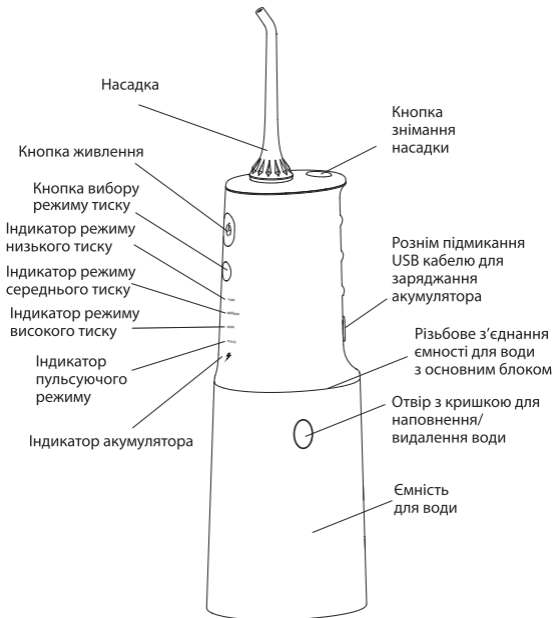


ЕТАПИ РОБОТИ

Початок роботи


ВАЖЛИВО! Перед першим використанням, будь ласка, повністю зарядіть пристрій.

USB адаптер у комплекті не постачається. USB кабель сумісний з будь-яким USB адаптером живлення 220 В/5 В, 1 А.

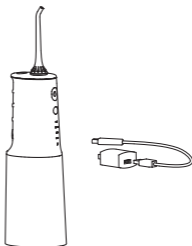


ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Нахиліть насадку і спрямуйте її до ротової порожнини вниз, наведіть на зуби, потім увімкніть пристрій.

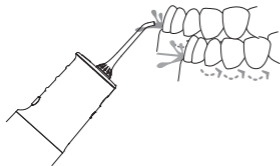

Спрямуйте потік води до ясен під кутом 90°, щоб уникнути розбризкування води. Для найкращих результатів почніть з очищення кутніх зубів і чистіть у напрямку до передніх зубів. Просуньте кінець насадки по лінії ясен для очищення проміжків між яснами та зубами.

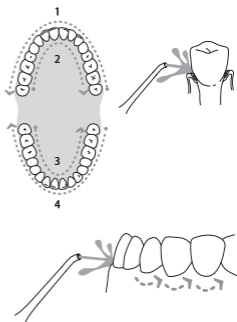


ЯК ЗБИРАТИ І РОЗБИРАТИ ПРИЛАД


Після використання

Для зливу залишків води

Вимкніть пристрій і відкрийте кришку ємності для води. Стежте, щоб отвір для води був розташований знизу (Зображення 1). Щоб остаточно видалити залишки рідини у внутрішніх каналах іригатора, увімкніть пристрій. Потім знову вимкніть пристрій.

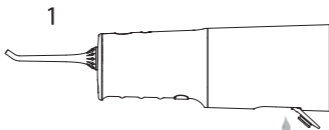

Для миття чи просушування ємності для води, її слід відокремити (відкрутити) від основного блоку іригатора. Зробити це нескладно. Лівою рукою тримайте за корпус пристрою, а правою – за ємність, як показано на зображенні 2. Поверніть правую рукою проти годинникової стрілки, щоб зняти ємність з водою, як показано на зображенні 3.

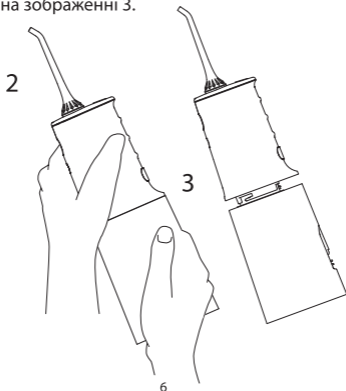


Встановлення та видалення насадки

Вставте насадку в середній отвір, поки не почуєте клацання.




Як показано на зображенні, відкрийте ємність і наповніть її водою.

Зверніть увагу! Переконайтеся, що пристрій вимкнено під час заповнення ємності для води.

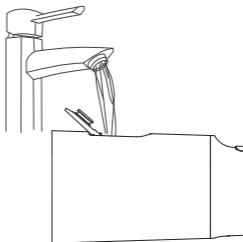

Для заміни або зняття насадки, натисніть відповідну кнопку та зніміть насадку.

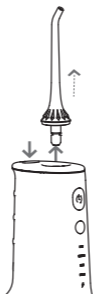

- Прилад має функцію пам'яті, тому працює за замовчуванням у режимі останнього використання.
- Під час увімкнення живлення приладу натисніть кнопку вибору режиму, щоб переключитися між режимами низького, середнього, високого тиску та імпульсним режимом. Вибір режиму супроводжується увімкненням відповідного світлового індикатора на ручці пристрою.
- Режим також можна обрати, коли живлення вимкнено. Пристрій автоматично вимикається після 120 секунд роботи в будь-якому режимі.
- Під час заряджання блимає світловий індикатор; коли заряджання завершено, світловий індикатор підсвічується безперервно.
- Почергове блимання індикатора білим і червоним кольором свідчить про низький рівень заряду акумулятора. Якщо індикатор блимає червоним кольором, зарядіть прилад.
- Прилад не можна використовувати під час заряджання.
- Поверніть регулятор насадки, щоб відрегулювати напрямок потоку води.
- Через чутливість ясен під час першого використання може виникнути невелика кровотеча ясен. Це звичне явище.
- Під час першого використання оберіть режим низького тиску і поступово збільшуйте до режимів середнього та високого тиску.



КОМПЛЕКТАЦІЯ

Основний прилад – 1 шт


Ємність для води – 1 шт

Струменеві насадки – 2 шт

USB кабель – 1 шт

Інструкція (містить гарантійний талон) – 1 шт

АКСЕСУАРИ

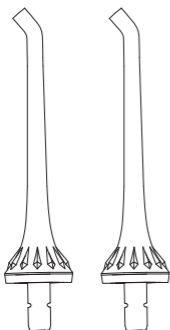

Насадки x 2



USB кабель x 1

Змінні насадки/аксесуари можна придбати окремо.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Основні заходи безпеки

При використанні електричних виробів завжди слід дотримуватися заходів безпеки.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЗАВЖДИ ЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ КОРИСТУВАЧА.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб зменшити ризик ураження струмом:

- Не користуйтеся зарядним пристроєм мокрими руками.
- Не занурюйте у воду чи іншу рідину.
- Не використовуйте під час купання.
- Не розміщуйте та не зберігайте прилад там, де він може впасти у ванну, душову кабінку або раковину.
- Не торкайтеся до приладу, який впав у воду. Відключіть вилку з розетки негайно.
- Перевірте кабель зарядного пристрою на наявність пошкоджень перед першим використанням і протягом використання.

Щоб зменшити ризики опіків, ураження струмом, пожежі, травмування або пошкодження:

Не підключайте прилад до системи напруги, яка відрізняється від системи напруги, зазначеної на приладі або зарядному пристрої.

Не використовуйте прилад, якщо у нього пошкоджений кабель або штепсельна вилка.

Якщо прилад не працює в належний спосіб, або він потрапив у рідину, зверніться в авторизований сервісний центр.

Використовуючи прилад, не спрямовуйте потік води під язик, у вухо, ніс або інші чутливі ділянки - такі дії можуть призвести до отримання травми. Використовуйте прилад тільки відповідно до інструкції або рекомендацій вашого стоматолога.

Це нормальне явище, якщо ясна трохи кровоточить під час першого використання іригатора. Якщо кровотеча сильна, будь ласка,

припиніть використання іригатора і зверніться до стоматолога. Заповнюйте ємність для води водою або іншими розчинами, які рекомендує ваш стоматолог.

Не кидайте прилад і не вставляйте в нього сторонні предмети.

Тримайте зарядний пристрій та кабель подалі від нагрітих поверхонь.

Не використовуйте прилад там, де використовуються кисневі або аерозольні розпилювачі.

Не використовуйте ополіскувачі для ротової порожнини, які містять йод, відбілювач або олію чайного дерева.

Перед використанням зніміть ювелірні прикраси.

Не використовуйте прилад, якщо у вас є відкрита рана в ротовій порожнині.

Під час прийому антибіотиків проконсультуйтеся з лікарем щодо використання іригатора для очищення ротової порожнини.

Підходить тільки для домашнього використання.

Не використовуйте на відкритому повітрі.

Прилад не призначений для використання особами (зокрема дітьми) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не перебувають під контролем або не проінструктовані щодо використання приладу особою, відповідальною за їхню безпеку.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ БАТАРЕЇ

Обслуговування батареї

- Літій-іонний акумулятор: 3,7 В, 1900 мА*год. Одного заряджання протягом 4 годин вистачатиме на тиждень. Даний тип батареї дозволено до авіаперевезення як у зареєстрованому багажі, так і у ручній поклажі. За умовами перевезення, будь ласка, зверніться до вашого авіаперевізника.
- Перед першим використанням пристрій потрібно заряджати протягом 24 годин. Надалі заряджайте іригатор протягом 4 годин.
- Підключіть USB-кабель до розетки для заряджання та увімкніть живлення.
- Якщо пристрій не використовувався протягом тривалого періоду, необхідно повністю зарядити іригатор, перш ніж знову його використовувати.
- У разі виникнення попередження про низький рівень заряду батареї, зарядіть іригатор.

Утилізація батареї

Пристрій оснащений літійовим акумулятором, який підлягає утилізації після завершення терміну експлуатації.

Для утилізації зверніться в місцевий центр переробки відходів.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Рішення
Витік води між насадкою і корпусом	Несправність ущільнювального кільця на насадці	Замініть насадку
Витік води з ємності для води	Несправність ущільнювального кільця	Замініть ущільнювальне кільце
Недостатній тиск	Низький рівень заряду	Зарядіть батарею
Помилка під час увімкнення	Низький рівень заряду	Зарядіть батарею
Помилка під час увімкнення	Сторонні предмети у фільтрі	Очистіть фільтр

Якщо вищезгадані рішення не допомагають усунути несправність, зверніться в авторизований сервісний центр.